

DESCRIPTION :


Attelle d'immobilisation et de maintien de l'épaule en position "coude-au-corps".

CARACTERISTIQUES:

- La largeur de l'écharpe assure un excellent maintien,
- Utilisable indifféremment sur le bras gauche ou droit,
- Disponible en 3 tailles,
- Positionnement et retrait faciles,
- Ajustable à la morphologie du patient,
- Hygiène : Lavable à 30°C,
- Fixation additionnelle pour maintien du coude,
- Support en mousse recouvert de tissu bouclette, très confortable.

Velcro en Y disponible en sachet de 14.

- Ne contient pas de latex naturel
- Ne contient pas de phthalate

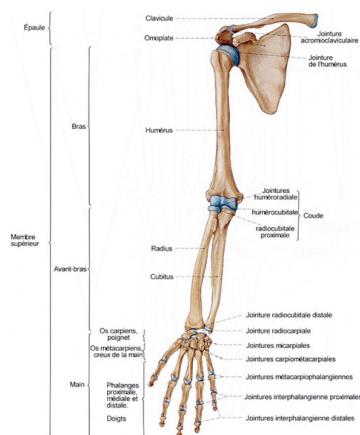

INDICATIONS:

- (Sub)luxations de l'épaule et lésions ligamentaires ou musculaires de l'épaule.
- Après intervention chirurgicale (ex: réparation de la coiffe des rotateurs).
- Capsulite
- Fractures de l'omoplate et de l'épiphyse ou de la diaphyse de l'humérus

MODE D'EMPLOI:**Application**

1. Placer le bras dans l'attelle d'immobilisation et faire pendre les deux sangles sur les épaules.
2. Croiser les sangles dans le dos du patient pour empêcher le glissement.
3. Passer les deux sangles sous l'attelle vers l'avant et les couper à la longueur adaptée. Repositionner les systèmes d'attache en forme de Y aux extrémités des sangles et les attacher à l'attelle.
4. Enrouler la large sangle autour du buste et du bras blessé. L'attacher d'abord à l'attelle avec la partie auto-agrippante, puis la replier sur le bras blessé en passant derrière le dos. Attacher l'autre bout à l'avant.
5. Le kit contient une sangle courte supplémentaire qui permet d'utiliser l'attelle sans la sangle plus large. L'utilisation de ce système est recommandée en période de fin de réadaptation, quand une immobilisation plus légère est requise. Attacher la sangle courte avec l'attache auto-agrippante à l'avant et à l'arrière, en recouvrant l'arrière du coude.

PARTICULARITES D' UTILISATION:

Voir précaution d'emploi

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

L'attelle d'immobilisation doit être ajustée la première fois par un médecin ou un membre du personnel soignant habitué à traiter les lésions pour lesquelles elle est prescrite. Cette personne a la responsabilité de donner des instructions d'utilisation au patient et aux personnes qui l'assistent.

- En cas de gonflement anormal, de décoloration anormale de la peau ou de gêne inhabituelle, nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation de l'attelle et de consulter un médecin.
- Ajuster la tension de l'attelle pour ne pas entraver la circulation. Après l'application de l'attelle, nous recommandons un examen de la circulation.
- Etre vigilant en présence d'œdèmes fluctuants.
- S'assurer d'apporter les soins appropriés aux plaies ouvertes ou aux zones infectées avant application.

ENTRETIEN :

Fermer les attaches. Laver en machine à 30°C (cycle délicat) ou à la main à l'eau tiède avec un savon doux. Faire sécher à température ambiante. S'assurer que l'attelle soit parfaitement sèche avant de l'utiliser à

nouveau.

CONTRE-INDICATIONS:

- Fractures instables des membres supérieurs.

CONDITIONNEMENT:

Boîte carton unitaire

Existe en 3 tailles S, M, L

Présentation hôpital sans vignette

a. Adulte

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809123456		72859-00001-00	Small	1	30	
4042809123487		72859-00002-00	Medium	1	30	
4042809123517		72859-00003-00	Large	1	30	

b. Fermeture bande auto-agrippante en Y supplémentaire

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809125252		73466-00000-00	-	1 sachet de 14	50 sachets	

Présentation pharmacie avec vignette

a. Adulte

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809123456	7917931	72859-09001-00	Small	1	30	1156684
4042809123487	7917948	72859-09002-00	Medium	1	30	1156684
4042809123517	7917954	72859-09003-00	Large	1	30	1156684

b. Fermeture bande auto-agrippante en Y supplémentaire

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809125252	7136518	73466-09000-00	-	1 sac de 14	50 sachets	1156684

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Produit livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282



- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**